

# کیانو زیست ویستا

شماره صفحه: ۱ از ۴  
KNB-1400-1079 شماره گزارش:  
TR-02-01 کد سند:

آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی  
شرکت همکار بازرگانی و نمونه برداری کالا سازمان ملی استاندارد



## گزارش آزمون تحریک‌زایی

### نام و آدرس مشتری:

شرکت اندیشه گستر مسعود (شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۴۶۲۶۱۴) - تهران، خیابان شریعتی، روبروی خیابان دولت، کوچه امام زاده، پلاک ۱۴، واحد ۵ - شماره تماس: ۰۲۶۳۰۱۴۸ - ۰۲۶۴۴۳۱۲۷

### محل انجام آزمایش:

آزمایشگاه کیا نانو زیست ویستا - تهران، فلکه دوم صادقیه، به سمت جناح، انتهای خیابان طاهریان، پلاک ۵۸، ساختمان رز، طبقه ۴، واحد ۱۰ - شماره تماس: ۰۹۱۲۰۸۰۹۹۰۷ - ۰۴۴۰۲۴۰۲۳

### استاندارد آزمون و ارزیابی انتبار:

- ISO 10993-10:2010 "Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization "

### جدول زمانی:

۱۴۰۰/۰۵/۲۴	شروع آزمون:	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	پذیرش نمونه:
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	ارائه گزارش:	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	پایان آزمون:

### مشخصات نمونه:

سمان گلس آینومر	نام
اندیشه گستر مسعود - کشور ایران	شرکت سازنده
N000523/258/01	کد نمونه آزمایشگاه
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ انقضاض
-	Batch Number
-	روش استریل
۱۴۰۰/۰۲/۰۵	تاریخ تولید
00020401	LOT Number
-	REF Number

### خلاصه نتایج آزمون:

نتایج آزمون	روش آزمون	نوع آزمون
تحریک‌زایی ندارد	ISO 10993-10:2010	تحریک‌زایی - تست بر روی عصاره نمونه

مدیریت آزمایشگاه کیا نانو زیست ویستا  
سجاد محمدی  
کیانو زیست ویستا  
سهامی خاص  
ثبت ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

# کیانانو زیست ویستا

شماره صفحه: ۲ از ۴  
شماره گزارش: KNB-1400-1079  
کد سند: TR-02-01

آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو و اداره کل تجویزات پزشکی  
شرکت همکار بازرگانی و نمونه برداری کالا سازمان ملی استاندارد

KMB  
Kia Nano Bio Vista

## آماده سازی:

### ➤ آماده سازی نمونه ها:

#### • آماده سازی عصاره نمونه مورد آزمون:

به ازای هر  $0.2\text{ g}$  از نمونه مورد آزمون، ۱ میلی لیتر نرمال سالین به ظرف حاوی نمونه افزوده شد و به مدت  $72\pm 2$  ساعت درون انکوباتور با دمای  $37\pm 1$  درجه سانتی گراد نگهداری شد.

#### • آماده سازی نمونه کنترل منفی:

۱ میلی لیتر نرمال سالین به مدت  $72\pm 2$  ساعت در انکوباتور با دمای  $37\pm 1$  درجه سانتی گراد نگهداری شد.

### ➤ آماده سازی حیوانات:


#### • ۳ عدد خرگوش سفید نیوزلندی نر با وزن حدود $2\text{ kg}$ به مدت ۱ هفته قبل از انجام آزمون تحت نظر قرار گرفتند.

#### • $24\pm 2$ ساعت قبل از انجام آزمون پشت تمامی خرگوشها به ابعاد $15\times 10\times 10\text{ cm}$ سانتی متر تراشیده شد.

## روش آزمون و ارزیابی انطباق:

این آزمون و معیارهای ارزیابی انطباق آن مطابق با استاندارد ISO 10993-10:2010 می باشد.

#### • $0.5\text{ ml}$ میلی لیتر از عصاره نمونه مورد آزمون (سایت A) و نمونه کنترل (سایت B) به پچ استریل $2/5\times 2/5$ سانتی متری اضافه شد و بر روی سایتها تعیین شده در پشت کمر خرگوشها پاسخمن شدند (شکل ۱).

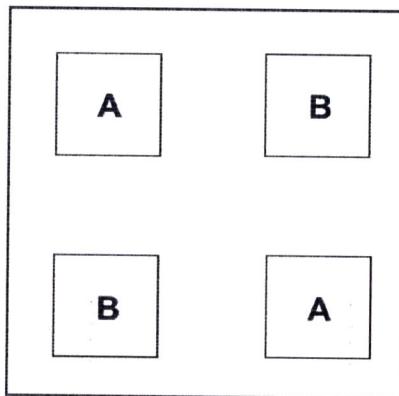

شکل ۱: محل های مشخص تماس پچ با پوست کمر حیوان

#### • خرگوشها به مدت $4\pm 2$ ساعت داخل رستینرهای قرار گرفتند.

#### • پاسخمنها باز شد و محل های قرار گیری پچ ها نشانه گذاری گردید.

#### • پشت کمر حیوانات با آب و لرم شستشو داده شد و سپس خشک گردید.

#### • بعد از گذشت $24\pm 2$ ، $48\pm 2$ و $72\pm 2$ ساعت محل های نشانه گذاری شده مورد ارزیابی ادما و اریتما قرار

#### گرفت و با توجه به جدول ذیل مشاهدات گزارش شد.

021-44024023  
09333672386  
1481634615  
[www.kiabio.com](http://www.kiabio.com)  
[info@kiabio.com](mailto:info@kiabio.com)

KMB  
Kia Nano Bio Vista  
کیانانو زیست ویستا  
ثبت شهادت خاص ۵۰۳۲۱۵

# کیا نانو زیست ویستا



شماره صفحه: ۴ از ۳  
KNB-1400-1079 شماره گزارش:  
TR-02-01 کد سند:

آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی  
شرکت همکار بازرگانی و نمونه برداری کالا سازمان ملی استاندارد

## معیار پذیرش:

با توجه به جدول ذیل واکنش‌های پوستی درجه بندی و گزارش می‌شوند.

Reaction	Irritation score
<b>Erythema and eschar formation</b>	
No erythema	0
Very slight erythema (barely perceptible)	1
Well-defined erythema	2
Moderate erythema	3
Severe erythema (beet-redness) to eschar formation preventing grading of erythema	4
<b>Oedema formation</b>	
No edema	0
Very slight oedema (barely perceptible)	1
Well-defined oedema (edges of area well-defined by definite raising)	2
Moderate oedema (raised approximately 1 mm)	3
Severe oedema (raised more than 1mm and extending beyond exposure area)	4
<b>Maximal possible score for irritation</b>	8
Other adverse changes at the skin sites shall be recorded and reported	

با توجه به جدول بالا میزان تحریک اولیه، نشان‌گر یکی از انواع پاسخ تحریکی می‌باشد.

Mean score	Response category
0 to 0.4	Negligible
0.5 to 1.9	Slight
2 to 4.9	Moderate
5 to 8	Severe

نمونه مورد آزمون نسبت به نمونه کنترل منفی، اگر پاسخ ناچیز داشته باشد غیرتحریکزا است.

نمونه مورد آزمون نسبت به نمونه کنترل منفی، اگر پاسخ خفیف تا شدید داشته باشد تحریکزا است.

## نتایج:

- بر اساس مشاهدات هیچ گونه علامت غیر طبیعی مشاهده نشد. در جدول زیر، میزان تحریک‌زایی برای نمونه مورد آزمون در بازه عددی ۰ تا ۸ گزارش شده است.

Rabbit No.	Group	Irritation score in interval hours		
		24±2	48±2	72±2
1	Test sample	0/0	0/0	0/0
		0/0	0/0	0/0
	Control	0/0	0/0	0/0
		0/0	0/0	0/0
2	Test sample	0/0	0/0	0/0
		0/0	0/0	0/0
	Control	0/0	0/0	0/0
		0/0	0/0	0/0
3	Test sample	0/0	0/0	0/0
		0/0	0/0	0/0
	Control	0/0	0/0	0/0
		0/0	0/0	0/0
Total		0/0		



# کیا نانو زیست ویستا

شماره صفحه: ۴ از ۴  
KNB-1400-1079 شماره گزارش:  
TR-02-01 کد سند:


آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی  
شرکت همکار بازرگانی و نمونه برداری کالا سازمان ملی استاندارد

**KNB**  
Kia Nano Bio Vista

## ارزیابی انطباق:

نتایج آزمون نشان دادند که پاسخ عصاره نمونه مورد آزمون (سمان گلس آینومر شرکت اندیشه گستر مسعود) به ادما و اریتما در مجموع صفر می باشد که نشان دهنده عدم تحریک‌زاگی نمونه مورد آزمون می باشد.

## تصویر نمونه مورد آزمون:

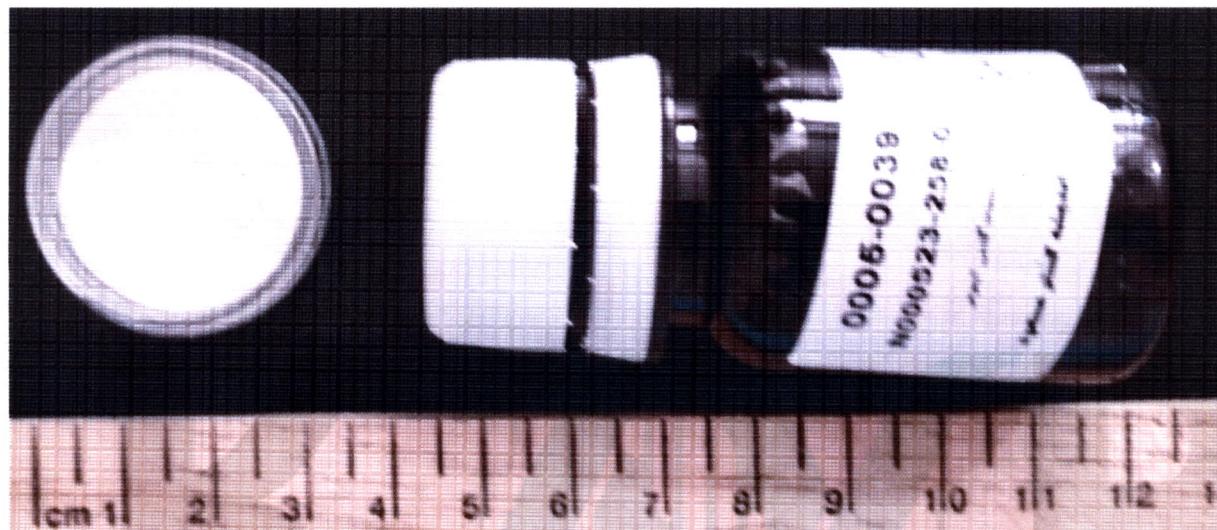

## مراجع:

- ISO 10993-10:2010 "Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization"
- ISO 10993-12:2012 "Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials"
- ISO 10993-02:2006 "Biological evaluation of medical devices - Part 02: Animal welfare requirements"



📞 021-44024023  
📠 09333672386  
✉️ 1481634615  
🌐 www.kiabio.com  
✉️ info@kiabio.com